



CAR-001

CARRO DE PARO

CARRO DE PARO **CAR-001** FABRIMED

DESCRIPCIÓN

Carro de paro de 5 gavetas, diseñado para ofrecer acceso rápido y organizado a insumos y equipos médicos en emergencias. Su diseño ergonómico y fácil movilidad lo hacen una solución práctica y confiable en el entorno hospitalario.




CARRO DE PARO **CAR-001** FABRIMED

CARACTERÍSTICAS

Gavetas

El carro de paro cuenta con 5 gavetas para almacenar suministros medicos, dos de ellas contiene compartimentos separadores para la clasificación y así tener un mejor control de estos.

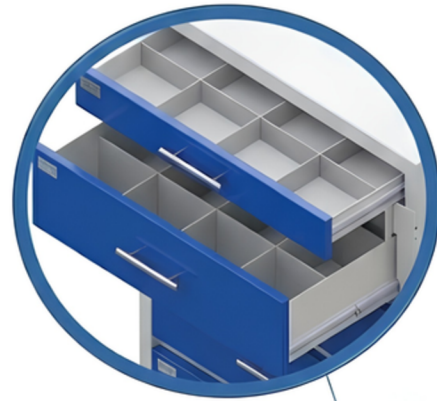


Perilla roscada

Encargada de asegurar el atril porta suero a la altura que mejor se ajuste en las intervenciones intravenosas.



Manillar de empuje

Superficie superior en acrílico transparente, resistente y de fácil limpieza y desinfección.

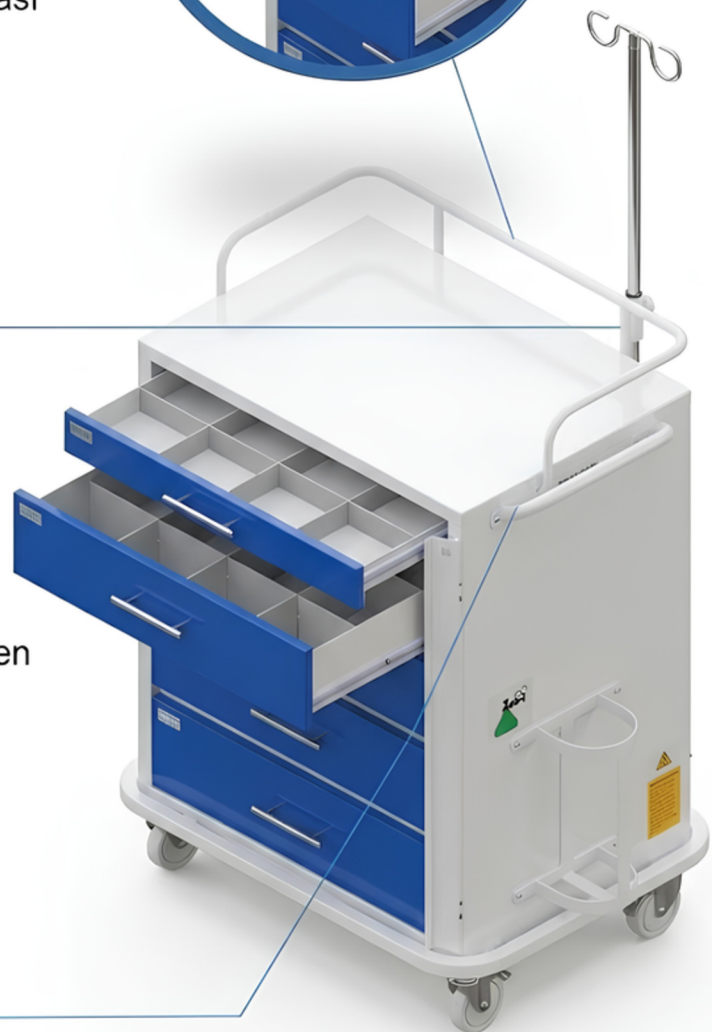

CARRO DE PARO **CAR-001**

FABRIMED



CARRO DE PARO

FABRIMED

CAR-001

1. INFORMACIÓN GENERAL Y DE CONTACTO

Concepto	Detalle
Fabricante	Fabrimed (FÁBRICA DE MUEBLES)
Producto	Carro de Paro
Referencia / Modelo	CAR-001
Versión del Documento	VERSIÓN-01

2. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES DEL EQUIPO

Componente	Especificaciones y Funcionalidad
Descripción General	Carro de 5 gavetas diseñado para acceso rápido y organizado a insumos médicos en emergencias, con diseño ergonómico y fácil movilidad.
Gavetas	Cuenta con 5 gavetas; dos de ellas incluyen compartimentos separadores para mejor clasificación y control.
Atril Porta Suero	Incluye una perilla roscada encargada de asegurar el atril a la altura que mejor se ajuste.
Superficie Superior	Acrílico transparente, resistente y de fácil limpieza y desinfección. Incluye manillar de empuje.
Sistema Eléctrico	Toma auxiliar para equipos (desfibriladores, oxímetros) y un cable de poder de 2m.
Seguridad	Sistema de cierre encargado de bloquear todas las gavetas en su interior.
Accesorios	Soporte para tanque de oxígeno.
Ruedas	4 ruedas de 4" de diámetro para traslados suaves. Cada rueda cuenta con sistema de bloqueo.

CARRO DE PARO **CAR-001**

FABRIMED

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES

Parámetro	Detalle / Dimensión
Estructura Principal	Lámina de acero cold rolled calibre 22.
Marco Protector	Tubo cuadrado de acero cold rolled.
Tubo Telescópico	Acero inoxidable AISI 304.
Acabado	Pintura electrostática resistente a la corrosión.
Medida Tubo Cuadrado	1 in(25,4mm).
Medida Tubo Telescópico	5/8 in (15,87 mm).
Dimensiones Generales	Altura: 1050 mm Largo: 500 mm Ancho: 700 mm.
Medidas del Acrílico	500 X 700mm.
Peso Aproximado	51 Kg.

4. USO, APLICACIONES Y GESTIÓN DEL DOCUMENTO

Categoría	Información
Recomendaciones	* No exceder la capacidad de carga del fabricante . * Asegurar el freno de las ruedas en cada intervención . * Limpiar las superficies después de cada uso.
Aplicaciones	Clínicas, Hospitales y Centros de atención ambulatoria.
Colores	Variedad de colores disponibles bajo pedido.
Fecha de Elaboración	21/10/2025.
Responsables	* Elaboró: Asistente de producción * Revisó: Director de operaciones * Aprobó: Director de operaciones