

Amoul®

www.digimedicalsas.com



AMOUL 12

DESFIBRILADOR

DESFIBRILADOR i2 AMOUL

DESCRIPCIÓN

4 EN 1 está integrado con cuatro modos, desfibrilación, monitorización, marcapaso externo y DEA. Esto le permite satisfacer las diversas necesidades de diferentes escenarios, tanto dentro como fuera del hospital. Este dispositivo versátil es adecuado para su uso en transporte, ambulancias, emergencias, cardiología, UCI y anestesia.



1. Seleccione el nivel de energía deseado

2. Presione el botón Cargar

3. Presione el botón Descargar para aplicar una descarga




DESFIBRILADOR i2

AMOU

CARACTERÍSTICAS

MODO DEA

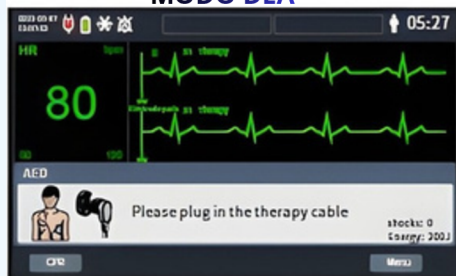

Este modo proporciona una descarga que salva vidas en cuestión de segundos, guiada por voz clara e indicaciones en pantalla.

MONITOREO DE PARÁMETROS MÚLTIPLES



Tres curvas, ECG de 3 derivaciones, y eventos.

DESFIBRILACIÓN MANUAL Y CARDIOVERSIÓN




Incluye modos de funcionamiento asíncrono y síncrono.

MARCA PASOS EXTERNO



i2 ofrece modo fijo y modo de demanda con velocidades y salida de marcapasos ajustables.

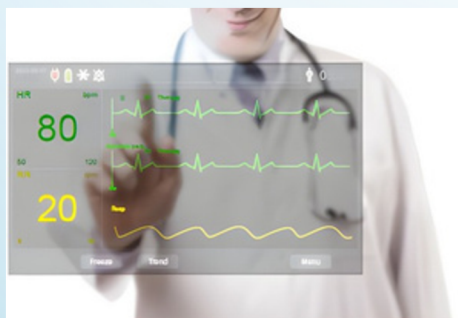

Pantalla a color de 7", interfaz intuitiva y fácil de usar, que facilita la legibilidad de la información del paciente en cualquier condición

DESFIBRILADOR **i2** AMOUL

CARACTERÍSTICAS



El mango que absorbe los golpes y la pantalla de doble capa pueden soportar golpes y caídas graves. La clasificación IP54 lo hace adecuado para atención de emergencia y uso extrahospitalario.



Las opciones de alimentación de CA y de batería brindan soporte ininterrumpido a largo plazo. La batería recargable proporciona hasta 5 horas de monitoreo. El tiempo de carga de la batería es inferior a 3 horas.



GANCHO PARA ASA PARA MANO
BARANDILLA DE CAMA

DEFIBRILADOR **i2** AMOUL

1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y FÍSICAS

Detalle	Descripción
Tamaño	320 x 200 x 120 mm
Peso	5,2 kg
Fuentes de Alimentación	AC: 100-240V, 50/60 Hz; Batería recargable de iones de litio
Autonomía de Batería	Proporciona hasta 5 horas de monitoreo
Tiempo de Carga de Batería	Inferior a 3 horas
Pantalla	Color de 7", interfaz intuitiva y de fácil lectura
Resistencia Física	Mango que absorbe golpes y pantalla de doble capa
Clasificación IP	IP54 (apropiado para uso extrahospitalario)
Accesorios de Sujeción	Asa para mano, gancho y barandilla de cama

DESFIBRILADOR i2 AMOUL

2. PARÁMETROS DEL DESFIBRILADOR

Detalle	Descripción
Modos de Operación	Desfibrilación manual, Cardioversión, DEA y Monitoreo
Forma de Onda	Exponencial truncada (BTE) bifásica con compensación de impedancia
Rango de Impedancia	25Ω ~ 200Ω (Desfibrilación externa)
Selecciones de Energía	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, y 360 J
Tiempo de Carga a 200 J	Menos de 5 segundos (batería nueva y cargada)
Tiempo de Carga a 360 J	Menos de 8 segundos (batería nueva y cargada)
Modo DEA	Descarga guiada por voz clara e indicaciones en pantalla
Cardioversión	Incluye funcionamiento síncrono y asíncrono

3. MARCAPASOS EXTERNO Y SUPERVISIÓN

Detalle	Descripción
Modos de Marcapaso	Modo fijo y bajo demanda
Forma de Onda	Pulso de onda cuadrada monofásico
Rango de Frecuencia	Tasa: 40 ppm ~ 170 ppm ±1,5\%
Ajustes de Marcapaso	Velocidades y salida ajustables
Parámetros de Supervisión	Tres curvas, ECG de 3 derivaciones y eventos
Solución de Red	Redes cableadas e inalámbricas 5G