

disonmed

www.digimedicalsas.com



DISONMED BB200

INCUBADORA CERRADA

INCUBADORA CERRADA **BB200**

DISONMED

DESCRIPCIÓN

Sistema controlado servo por microprocesador de la temperatura Modos de control: Modo del aire y modo de la piel del bebé La humedad es ajustable continuamente Fije la temperatura, temperatura del aire, temperatura de piel del bebé, la energía del contador de tiempo y de la calefacción es exhibida por separado por el LED Uno mismo – función de prueba, varias alarmas de la falta por audible y visual >función determinada 37 °C temperature Protección triple para la temperatura excesiva con el dispositivo cortado separado, más sistema de seguridad La inclinación de la cama infantil es ajustable Capilla de un sólo recinto, 4 ventanas de funcionamiento y 2 puertos del diafragma Dispositivo de fijación independiente para la puerta principal RS232 conector, entrada del oxígeno



Función opcional: Bandeja del cassette del rayo X; sistema del peso del bebé; Altura eléctrica ajustable; Unidad phototherapy del LED



- **Sistema de control:** Microprocesador con modos aire y piel del bebé.
- **Temperatura y humedad:** Ajustables con pantalla LED para temperatura, temporizador y potencia de calefacción.
- **Alarmas de seguridad:** Fallo de energía, sobret temperatura, desviación de temperatura, fallo del ventilador y sensor.

INCUBADORA CERRADA BB200 DISONMED


CARACTERÍSTICAS

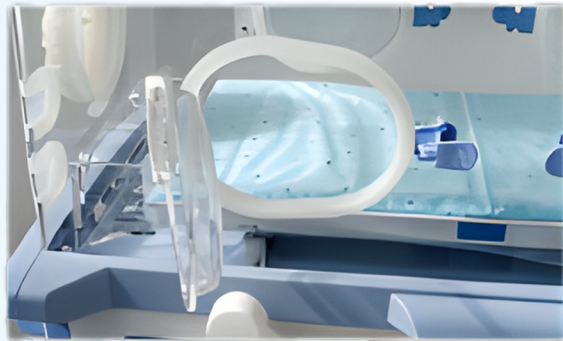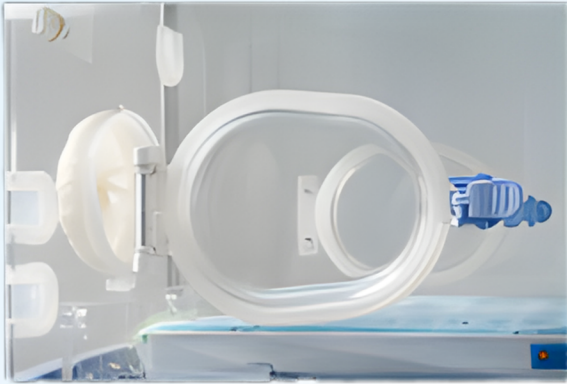

- *Protección avanzada:* Triple protección contra sobretemperatura con dispositivo de corte.
- *Diseño funcional:* Inclinação ajustable, capucha de pared única, 4 ventanas operativas, 2 puertos iris y 5 sellos de infusión.



- *Conectividad y extras:* Bloqueo independiente para la puerta frontal, conector RS232, entrada de oxígeno y bandeja.

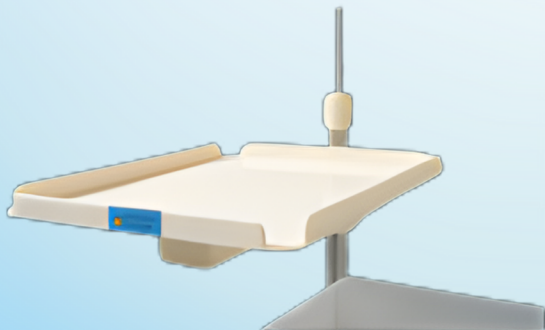

INCUBADORA CERRADA **BB200**

DISONMED

ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
<i>Fuente de alimentación</i>	CA (110/220) V (60/50) Hz
<i>Entrada de energía</i>	(650) VA
Condiciones de funcionamiento	
<i>Temperatura ambiente</i>	(20) °C ~ (30) °C
<i>Humedad relativa del ambiente</i>	(30) % ~ (75) %
<i>Velocidad del flujo de aire</i>	< (0,3) m/s
<i>Rango temp. del aire</i>	(25) °C ~ (37) °C (37,1) °C ~ (39) °C
<i>Rango temp. de la piel</i>	(32) °C ~ (37) °C (37,1) °C ~ (38) °C
<i>Precisión sensor de piel</i>	+/- (0,3) °C
<i>Fluctuación de temperatura</i>	+/- (0,5) °C
<i>Uniformidad del colchón</i>	</=(0,8) °C
<i>Tiempo de calentamiento</i>	< (30) min
<i>Nivel de ruido interno</i>	< (50) dB(A)
<i>Ángulo de inclinación</i>	+/- (10)°
<i>Tamaño del colchón</i>	(65) cm x (37) cm
<i>Capacidad del canal</i>	(1200) ml
<i>Filtro de aire</i>	(0,5) (micras)

INCUBADORA CERRADA **BB200**

DISONMED

ESPECIFICACIONES

Componente	Dimensiones (cm)	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)
Unidad de control y gabinete	(112) x (66) x (98)	(80)	(110)
Cubierta	(98) x (63) x (74)	(15)	(30)

Parámetro	Rango / Valor
Temperatura ambiente	(-10) °C ~ (+70) °C
Humedad relativa	$\geq$ (80) %
Presión atmosférica	(500) ~ (1060) hpa