

MAFET

www.digimedicalsas.com



MAFET M-058

Cama UCI

Cama UCI MAFET M-058

VENTAJAS

- **Totalmente ajustable para mejorar el confort del paciente.**
- **Motores silenciosos que no requieren mantenimiento, lo que reduce los costos operativos.**
- **Fácil limpieza y desinfección gracias a materiales desmontables y resistentes.**
- **Seguridad garantizada con barandas altas y sistema eléctrico protegido.**
- **Movilidad sin esfuerzo con ruedas dobles y frenos integrados.**




BENEFICIOS

- **Mejora la experiencia del paciente con ajustes ergonómicos y confortables.**
- **Facilita el trabajo del personal médico gracias a su manejo eléctrico y diseño práctico.**
- **Ofrece tranquilidad a hospitales y clínicas al ser una solución duradera, higiénica y segura.**



POSICIONES.

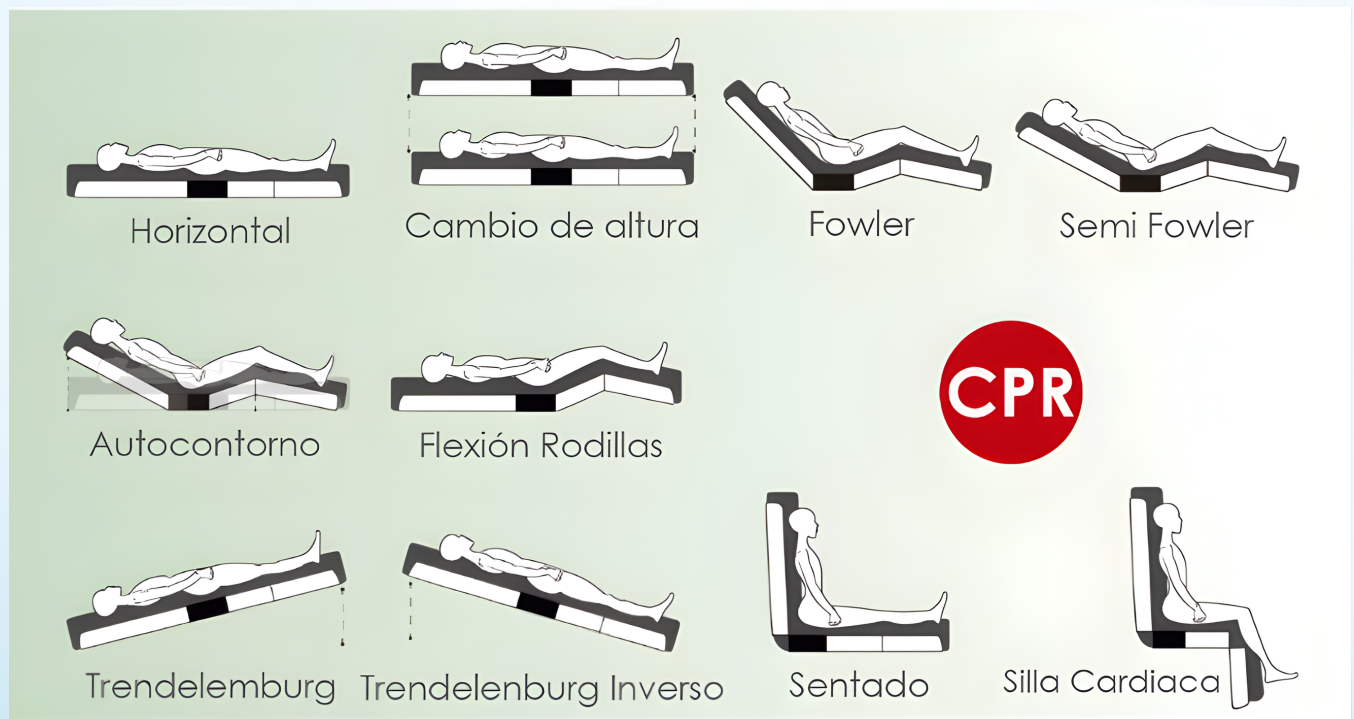

ESTRUCTURA

Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza.

Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 movibles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.

Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Altura min: 0.45 m - máx. 0.70 m - TRL: 12º

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.

FUNCIONAMIENTO

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso, hipertenso, silla cardiaca y posición automática de reanimación cardiopulmonar CPR; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 4 cuatro motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en casa de falla eléctrica.

4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático con indicador de grados.

4 ruedas de 6" con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.

Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.

ACCESORIOS

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno.