



AMOUL T5

VENTILADOR DE TRANSPORTE

VENTILADOR DE TRANSPORTE T5 AMOUL

DESCRIPCIÓN

Este ventilador de transporte inteligente y de diseño compacto es ideal para su uso en servicios prehospitalarios y de emergencias, acompañando al paciente durante todo el proceso. Dispone de una gran pantalla táctil que facilita su manejo y está equipado con múltiples modos de ventilación, incluyendo control de volumen y presión, opciones invasivas y no invasivas, así como monitorización completa de parámetros. Además, admite transmisión inalámbrica de datos, lo que lo convierte en una opción perfecta para integrarse en sistemas EMS, hospitales privados y escenarios de rescate de emergencia.



VENTILADOR DE TRANSPORTE **T5** AMOUL

CARACTERÍSTICAS

ALTA MOVILIDAD

- **Compacto y ligero:** Ideal para adaptarse a vehículos y situaciones de emergencia.
- **Bolsa de transporte desmontable:** Facilita el traslado y el almacenamiento.
- **Cumple con la norma EN1789:** Diseñado para uso en ambulancias, garantiza seguridad y fiabilidad.



ADAPTABILIDAD

- **Opciones de tratamiento flexibles:** Ofrece diversos modos de ventilación adaptados a las necesidades específicas de cada paciente.
- **Atención integral al paciente:** Brinda soporte continuo durante todo el proceso terapéutico.
- **Monitorización de la seguridad del paciente:** Protege la salud mediante la supervisión en tiempo real de parámetros críticos.



SOPORTE DE CONECTIVIDAD


- **Conectividad inteligente 5G:** Facilita la visualización y transferencia de datos en tiempo real, mejorando notablemente la eficiencia operativa.
- **Integración WiFi:** Brinda opciones de conexión versátiles, garantizando un acceso fluido a los datos y una comunicación estable en diferentes entornos.



VENTILADOR DE TRANSPORTE T5 AMOUL

SISTEMA DE SOPORTE PORTABLE DE ALTA INTEGRACIÓN

- Solución eficiente y rápida para
- emergencias y transporte

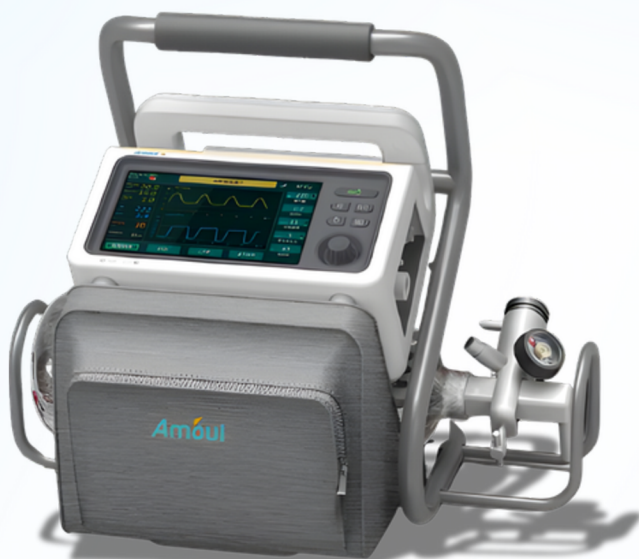

FÁCIL POR INSTALAR

- El anfitrión, el cilindro de O2 y la bolsa de accesorios se montan en la cámara móvil de manera fácil y constante
- La bolsa de accesorios resistente al agua puede contener mangueras respiratorias, máscara y otros accesorios



1 Batería cargable incorporada, compatible tanto con CC y CA


2 Entrada de O2, garra, PEEP incorporado, salida de aire fresco, puerto EtCO2

3 Soporte de sistemas de soporte móvil en la cabecera

4 Accesorio opcional de EtCO2

5 Cilindro opcional de fibra de carbono O2, peso ligero

6 Manguera respiratoria reutilizable

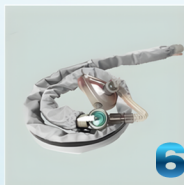

VENTILADOR DE TRANSPORTE **T5** AMOU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CATEGORÍA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS
Modelo y Diseño	Modelo T5: Diseño elegante, compacto y ultra-portátil (Peso: 3,4 kg). Resistente al agua y la intemperie con certificación IPX4 .
Pantalla e Interfaz	Pantalla táctil a color de 7" con bloqueo de seguridad. Visualización en tiempo real de 4 formas de onda y 3 bucles .
Pacientes Objetivos	Configuración óptima para pacientes Neonatales, Pediátricos y Adultos .
Modos de Ventilación (16)	V-AC, V-SIMV, PRVC, PRVC+, P-AC, P-SIMV, PCV, CPAP, CPAP+, BiPPV, BiPPV+, APRV, APRV+, CPR (RCP), RSA y HFNC (Alto Flujo) .
Modos Especiales	Modo RCP: Según directrices AHA / ERC . Modo Alto Flujo: Incorporado para cánula nasal (Ideal para pacientes COVID/Agudos).
Parámetros de Control	Volumen Corriente: 20 - 2500 ml. Relación I:E: 1:59 a 99:1. Concentración O2 (FiO2): 40% al 100%. Disparo (Trigger): Por Presión y por Flujo.
Gestión de Presión	Válvula PEEP electrónica interna integrada.
Monitoreo Avanzado	Alarmas audibles/visuales. Puerto y software para EtCO2 habilitado (Opcional Mainstream/Tecnología Respirationics).
Operatividad Rápida	Inicio rápido con auto prueba automática (Self-test) al encender.
Conectividad Smart	Soporte para redes 5G (transferencia de datos en tiempo real) e integración Wi-Fi para sistemas SME y hospitales.
Autonomía Eléctrica	Batería recargable de Li-ion con autonomía de 4 a 5 horas de trabajo continuo.
Estándares y Accesorios	Cumple norma EN1789 (Ambulancias). Incluye bolsa de transporte desmontable y circuito de silicona reusable/esterilizable (compatible con desechables universales).
Aplicaciones Ideales	Rescate prehospitalario, ambulancias de urgencias y transporte intra-hospitalario crítico.